




F35 R2

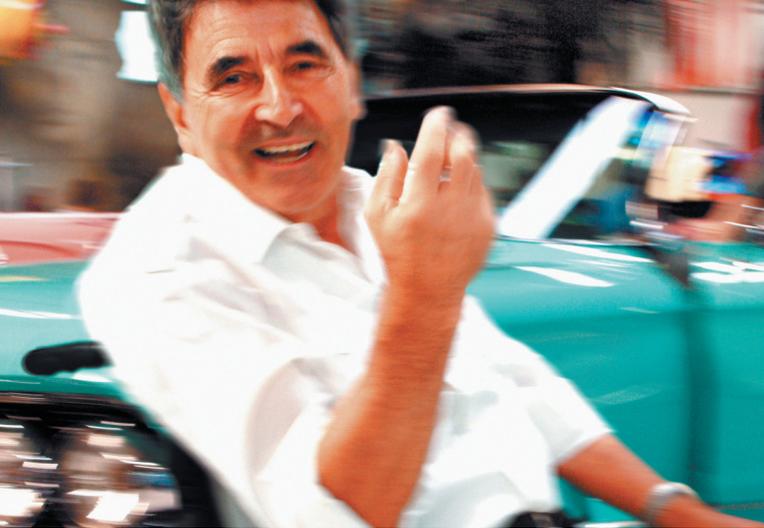

# F35 R2

Dobrável e muito transportável

## Cadeira de rodas eletrónica standard, cómoda e dobrável

A cadeira F35 R2 foi desenhada com múltiplos detalhes com o objectivo de conseguir a máxima comodidade para os seus utilizadores, bem como favorecer a acessibilidade no seu meio.

As suas **baterias de 50 Amph de série**, e os seus potentes motores permitem que a F35 R2 esteja mais tempo disponível para sua utilização em óptimas condições.

O seu carregador de 8 Amph permite recarregar as baterias num breve período de tempo.



## Tão cómoda de usar como de transportar

O encosto é facilmente desmontado desapertando os parafusos da parte inferior dos tubos. Assim a altura da cadeira torna-se mais curta para poder guardá-la ou transportá-la mais facilmente.

Uma vez tiradas as baterias e desmontado o encosto, a cadeira encaixa de uma forma muito compacta. Desta maneira ocupa muito pouco espaço, podendo transportar-se comodamente na bagageira de um automóvel.


As rodas anti-queda desmontam-se facilmente para retirá-las quando não forem necessárias.



Uma vez tiradas as baterias e desmontado o encosto, a cadeira encaixa de uma forma muito compacta.

## Uma cadeira à medida

F35 R2 é adaptável às necessidades de cada utilizador. O apoio para os braços pode ser ajustado em largura até 4,5 cm por cada lado. Isto permite ampliar o espaço do assento até 9 cm chegando aos 52 cm de largura. Através de uma simples alavanca, a altura do apoio para os braços é facilmente regulada, para que cada utilizador possa encontrar a altura que lhe parece mais cómoda.

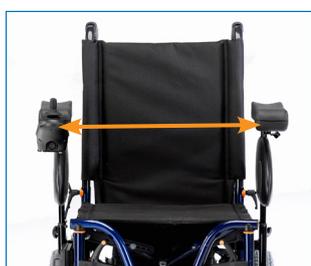


Apoios de braços reguláveis em largura para ampliar o espaço do assento até 52 cm.



Apoios de braços ajustáveis em altura para um maior conforto.



Apoio para os pés desmontável e rebatível também para dentro.

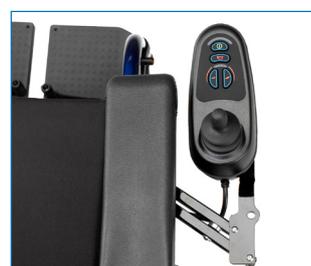

Comando rebatível em paralelo, o que facilita o acesso às mesas.



Apoio para os braços ergonómico

## Com ela para todos os lados

Os apoios para os pés podem ser rebatidos tanto para fora como para dentro da cadeira. Desta forma consegue-se encurtar o comprimento da cadeira sem ter de desmontar o apoio para os pés, para conseguir um melhor acesso a espaços reduzidos, como por exemplo elevadores.

Com almofada de série, para favorecer a comodidade.



Modelo com encosto reclinável

## Opções disponíveis

- Trepá-passeios
- Comando para acompanhante
- Comando para utilizador e acompanhante
- Comando mentoniano
- Apoios de pés eleváveis
- Encosto reclinável
- Rodas dianteiras e traseiras maciças

## Gama de cores



Azul



Dourado




Vermelho verão

# F35 R2

Dobrável e muito transportável

## Especificações técnicas

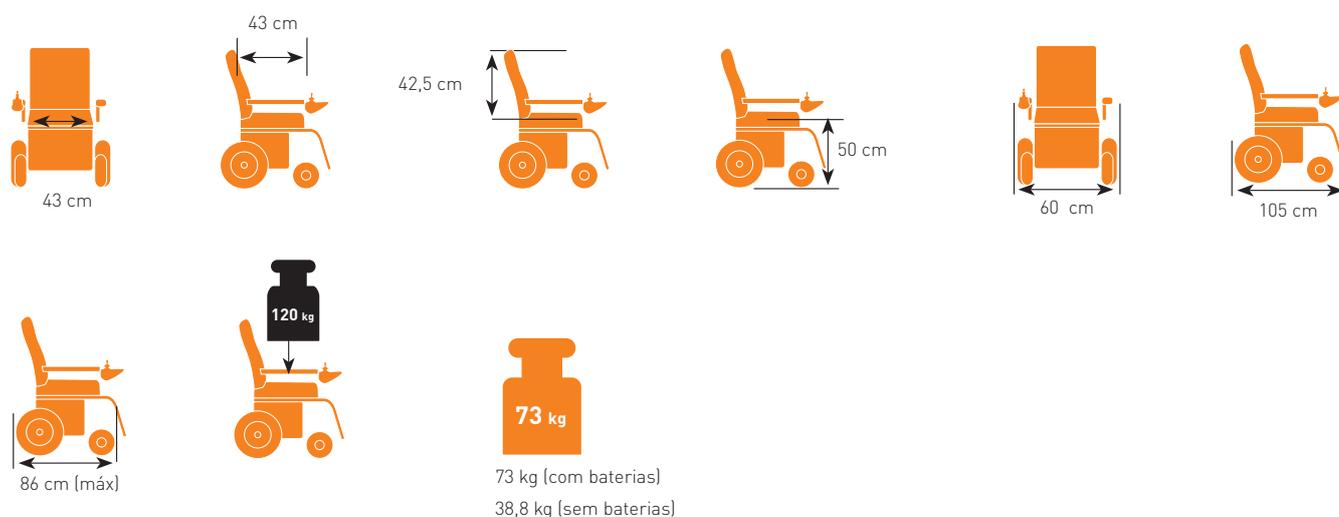

Largura do assento: 43 cm (regulável até 52 cm mediante apoio de braços)	Largura da cadeira dobrada:	33,5 cm
Profundidade do assento: 43 cm	Raio de giro:	60 cm
Altura do encosto: 42,5 cm	Inclinação máxima:	10° (18%)
Altura assento- chão: 50 cm	Baterias:	50 Amp
Largura total: 60 cm	Carregador:	8 Ah
Longitude total: 105 cm	Cor da armação:	Azul, dourado e vermelho verão
Longitude total sem apoios de pés: 86 cm (máx)	Peso máximo suportado:	120 kg

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34

Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Rev.1- Julho 2014